

handleiding en tips

aspirator

Bedankt om deze aspirator te ontlennen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.



goed
thuiszorgwinkel
hoorcentrum
apotheek

wat huur je bij Goed?



De aspirator die je ontleent omvat volgende onderdelen: Breng al deze onderdelen terug bij het einde van de huurperiode.

1. toestel type SP20
2. metalen T-stuk
(en bevestigingsknop)
3. sterknop voor
opvangbokaal
(indien er geen
houder is voorzien)
4. stroomsnoer

De andere toebehoren dien je om hygiënische redenen **zelf aan te kopen**. Die hoef je op het einde van de huurperiode niet terug te geven.


1. filter
2. opvangbokaal
3. slangenset

 **Tip:** alle metalen onderdelen behoren tot het gehuurd toestel en moet je steeds terug meebrengen aan het einde van de huurperiode.


aansluiten van de toebehoren op de aspirator



Onze medewerkers helpen je graag om de toebehoren op de juiste manier aan te sluiten. Het is belangrijk dat alles goed is aangesloten om drukverlies te voorkomen en de juiste werking van de aspirator te garanderen.

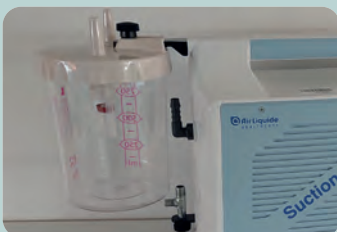

- Schuif de **bokaal** over de arm bovenaan het toestel en schroef met de sterknop vast. Bij sommige modellen is er geen sterknop, maar kan je de bokaal in een metalen houder zetten.

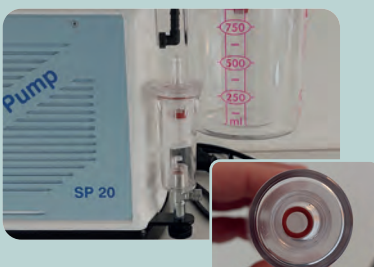

- Schroef de **filter** stevig op het metalen T-stuk vast. Let hierbij op dat de rode dichtingsring zeker tussen het T-stuk en filter zit. Als dit niet zo is of als de filter te los op het T-stuk staat zal het toestel niet goed werken. Het luchtverlies leidt immers naar minder zuigkracht.

- Sluit de slangenset aan.

Korte darm: verbind de grijze uitgang van het toestel met de bovenkant van de filter. Opmerking: op foto 2 werd de opvangbokaal voor de duidelijkheid opnieuw even weggenomen.

Korte darm: verbind de onderkant van de filter (eigenlijk het T-stuk) met de uitgang van de opvangbokaal waar 'to unit' bij staat.

Lange darm met wit koppelstuk: sluit aan op de opvangbokaal (uitgang met 'to patient' bij). Via het witte koppelstuk kan je dan een aspiratiesonde aankoppelen.

- De **aspiratiesonde** is steriel materiaal en verkopen we niet standaard bij Goed thuiszorgwinkel. Je kan die echter wel reserveren en afhalen bij een Goed-apotheek.

tips bij gebruik

- Gebruik de aspirator altijd in overleg met een zorgprofessional. Je arts, verpleegkundige of kinesist bepaalt de gewenste druk in functie van jouw individuele symptomen.
- Doe voor het eerste gebruik een bodempje water (1 vinger hoog) in de opvangbokaal. Zo verloopt het reinigen van de bokaal makkelijker. Opgezogen slijmen blijven minder gemakkelijk kleven.
- Schakel het toestel in. Je zal zien dat de drukmeter niet onmiddellijk omhoog gaat. Dat is normaal. De druk wordt pas opgebouwd als er een blokkage van de luchtstroom is, bijvoorbeeld bij opzuigen van slijmen.
- Stel de door de zorgprofessional afgesproken druk in. Eens die is ingesteld, moet die voor de volgende keren slechts beperkt worden bijgesteld. Draai naar rechts voor hogere druk of naar links voor minder druk.
- Was eerst goed je handen of doe handschoenen aan vooraleer je de steriel verpakte aspiratiesondes vastneemt.
- Open de verpakking van de aspiratiesonde en sluit die op het witte koppelstuk aan.
- Aspireer nu via de techniek die je door de zorgprofessional is aangeleerd.
- Eindig met het opzuigen van wat water om de leidingen te spoelen. Zo blijven er geen kleverige slijmen achter die de leidingen kunnen blokkeren.
- Doe je handschoenen uit.



Tip: Neem bij het uitdoen van de handschoenen de aspiratiesonde in je hand. Zo kan je die in de omgekeerde handschoen veilig wegwerpen.

onderhoud van de aspirator

Het toestel vraagt weinig onderhoud. Toch hou je best rekening met de volgende zaken:

- Gooi na het aspireren je handschoenen en de aspiratiesonde weg. Gebruik elke keer een nieuwe aspiratiesonde.
- Maak de opvangbokaal tijdig leeg. De aan het deksel bevestigde vlotter zorgt ervoor dat de afgezogen vloeistof blokkeert en een teveel aan aangezogen vloeistof niet in de pomp kan lopen. Het beste is de bokaal leeg te maken vooraleer de vloeistof de vlotter bereikt. Als de bokaal overloopt zal de filter en/of het toestel beschadigd raken en niet goed meer zuigen. Zet opnieuw een vinger water in de bokaal nadat je die hebt leeggemaakt.
- Zorg dat de roosters op de zijkant van het toestel bij gebruik vrij blijven.
- Aangezien het toestel lichaamsvocht opzuigt, raden we aan om het toestel regelmatig met een licht vochtige doek proper te vegen. Zo vermijd je dat er bacteriën kunnen ontstaan.

wat als het aspireren niet goed lukt

Breng je de sonde bij het aspireren op de correcte manier in?

Consulteer je professionele zorgverstrekkers (arts, verpleegkundige, kinesist ...) om dat nog eens samen te overlopen.

Is de draaiknop voor de druk correct ingesteld?

Boven de drukmeter zit een zwarte draaiknop waarmee je de druk kan regelen. Draai de knop naar rechts om de druk te verhogen. Draai de knop naar links om de druk te verlagen.

Zijn de toebehoren correct aangesloten?

Indien dat niet het geval is, zal het toestel misschien onvoldoende kracht opbouwen. Overloop de verschillende onderdelen en controleer of alles correct (en luchtdicht) is aangesloten.

Gaat de wijzer op de manometer niet onmiddellijk omhoog?

Dat is normaal. De druk wordt pas opgebouwd als er een obstructie van de luchtstroom is. Dat gebeurt dus pas als je op een slijmprop stuit.



Tip: Je kan zelf testen of het toestel wel degelijk druk opbouwt door de sonde even af te sluiten. De naald moet nu relatief makkelijk tot 70–80 kPa gaan. Is dat niet zo? Breng het toestel dan samen met de toebehoren terug naar Goed thuiszorgwinkel. We zoeken dan even voor jou uit wat het probleem is.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel

☎ 03 205 69 29

📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed hoorcentrum

🌐 www.goed.be/hoorcentrum

☎ 03 205 69 20

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop.

Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afspraak

☎ 03 205 69 29

goed

samen sterk in het leven